

10 PACK

**FIRST[®]
PROTEC
FFP2**

FICHA TECNICA
ecomatters JY-MF-B1

FFP2 NR
Media Máscara Filtrante

CE | 0598



UNE EN 49:2001+A1:2009



Mascarilla FFP2, Ensayadas y con marcado CE según EN 149:2001+A1:2009.



**Clase de mascarilla
(FFP2 NR)
EN 49:2001+A1:2009**



**Mascarilla con marcado
de organismo
notificado CE 0598**



**(NR), No reutilizable
Modelo ecomatters
JY-MF-B1**



Referencia de fábrica : ecomatters JY-MF-B1

Grado	EPI Cat.III NR
Standard	UNE - EN 149:2001 + A1:2009
Caducidad	2 AÑOS
Capas	5
Material	Spunbond, tela no tejida fundida, tira nasal, banda elástica para la oreja.
Medidas	Medida: 11 cm. ancho x 15 cm. alto (mascarilla cerrada)



Envase individual
Codificación EAN 13



Cajas de 10 Bolsas
individuales



Packaging en idioma
castellano



Código EAN 13 envase unitario	8435382498732
Código EAN 13 caja	8435382497575
Caja (Unidad de venta)	10 Uds
Caja - Dimensiones	11,5X13X6,5cm
Caja - Peso kg	0,2kg



Caja cartón
10 Unidades



Idioma
Castellano



Codigo de barras
EAN 13



EAN 13



EcoMatters JY-MF-B1
CE 0698 FFP2 NR
EN 149:2001+A1:2009

Please refer to the instruction before use.

FIRST[®]
PROTEC

FFP2
EcoMatters Protective Mask

CE 0598

10 PCS

EcoMatters JY-MF-B1 FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009

Fecha de producción (Lot): FFP2 de 04/11/2022 a 02/01/2023
 Date of production (Lot): FFP2 de 04/11/2022 a 02/01/2023
 Produktionsdatum: Chargennummer FFP2/Produktion: 2. Jahrg.

2021.05.01
2022.01.01
2022.12.31



ESP. - SE DEBE LEER LA INSTRUCCIÓN SUMINISTRADA CON EL PRODUCTO.
 Este producto está diseñado para ser utilizado en condiciones de temperatura ambiente entre 5 °C y 50 °C, y humedad relativa entre 40% y 80%. No se recomienda utilizar este producto en condiciones de temperatura superior a 50 °C o inferior a 5 °C, o en condiciones de humedad superior al 80% o inferior al 40%.
 Este producto está diseñado para ser utilizado en condiciones de temperatura ambiente entre 5 °C y 50 °C, y humedad relativa entre 40% y 80%. No se recomienda utilizar este producto en condiciones de temperatura superior a 50 °C o inferior a 5 °C, o en condiciones de humedad superior al 80% o inferior al 40%.

USE THE INSTRUCTIONS SUPPLIED BY THE MANUFACTURER.
 This product is designed to be used in ambient temperature conditions between 5 °C and 50 °C, and relative humidity between 40% and 80%. It is not recommended to use this product in conditions of temperature above 50 °C or below 5 °C, or in conditions of humidity above 80% or below 40%.

READ THE INSTRUCTIONS SUPPLIED BY THE MANUFACTURER.
 This product is designed to be used in ambient temperature conditions between 5 °C and 50 °C, and relative humidity between 40% and 80%. It is not recommended to use this product in conditions of temperature above 50 °C or below 5 °C, or in conditions of humidity above 80% or below 40%.



8 435382 497575

www.firstprotec.com
 Read this instruction manual carefully before use
 JY-MF-B1 FFP2
 Importado por: EcoMatters, S.L. - Via Estor 190, Santiago de Compostela 15105 - La Coruña España - info@firstprotec.com

GER. - SE DEVE LEGGERE LE ISTRUZIONI FORNITE CON IL PRODOTTO.
 Questo prodotto è progettato per essere utilizzato in condizioni ambientali di temperatura compresa tra 5 °C e 50 °C e umidità relativa compresa tra il 40% e l'80%. Non si consiglia di utilizzare questo prodotto in condizioni di temperatura superiore a 50 °C o inferiore a 5 °C, o in condizioni di umidità superiore all'80% o inferiore al 40%.

POUR VOUS INFORMER PROPREMENT DU PRODUIT.
 Ce produit est conçu pour être utilisé dans des conditions ambiantes de température comprise entre 5 °C et 50 °C, et d'humidité relative comprise entre 40% et 80%. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit dans des conditions de température supérieure à 50 °C ou inférieure à 5 °C, ou dans des conditions d'humidité supérieure à 80% ou inférieure à 40%.



Bolsa PVC
1 Unidad



Codigo de barras
EAN 13



Idioma
Castellano

POR: VER INFORMAÇÃO PROPORCIONADA PELO FABRICANTE.

Modo de emprego: Passo 1 - Abrir a máscara mantendo o clipe nasal para cima e separar os elásticos para as orelhas usando as duas mãos. Passo 2- Colocar a máscara sobre a cara e o queixo. Passo 3 – Colocar os elásticos atrás das orelhas. Passo 4 – Colocar os dedos sobre a parte superior da peça metálica incorporada na máscara, pressionar e adaptar a peça ao contorno do nariz utilizando a ponta dos dedos.

INDICAÇÕES: Verificar que a embalagem está em boas condições. Se o pacote estiver danificado, não utilizar o produto. Ler atentamente a informação proporcionada na embalagem e verificar a data de validade. Este produto não é reutilizável. Cada máscara só se pode usar uma vez. É recomendável trocar a máscara cada 12 horas. Lavar bem as mãos depois de descartar a máscara utilizada. Conservação e transporte: Guardar num lugar fresco, seco e bem arejado. Durante o transporte, manter ao abrigo da humidade e da luz solar. Condições de armazenamento: temperatura 5°C - 50°C; humidade relativa ≤80%. Utilidade do produto e cumprimento das regulamentações: Este produto foi concebido como Proteção contra aerossóis sólidos e líquidos em suspensão na atmosfera, cumpre os requisitos da norma EN149:2001+A1:2009 que demonstra a sua conformidade com os requisitos básicos em matéria de saúde e segurança do Regulamento (UE) 2016/425.

Fabricado em China. Made in China: Hergestellt in CHINA: Guangdong Jinyuan Biotechnology Co., Ltd. Address : Factory No.1, D5-8-3, Beizhanxi Road, Chaozhou Economic Development Pilot Zone, Chaozhou City, Guangdong Province, China. MODEL JY-MF-B1 (ecomatters) Product Size : 16 X 11 cm. Importado y distribuido por Dismark Products SL. Via Edison 19 C, Santiago de Compostela 15705, La Coruña, España. info@firstprotec.com | Tel: +34 981 557 625 www.firstprotec.com Lote: ver envase / Fecha de producción/ Lote / Final de vida útil: 2 años. / Production Date/ Batch No. : End of Shelf Life : 2 years./ Data de fabrico / N° de lote / Utilizar num prazo máximo de: 2 anos. Produktionsdatum / Chargennummer /Halbbarkeitsende: 2 Jahre.

ESP - VÉASE LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR EL FABRICANTE.

Instrucciones: Coloque un lado de la máscara con el clip nasal hacia arriba y las gomas elásticas a los dos lados de las orejas. Presione el clip suavemente para ajustar el puente nasal. Luego presione y sostenga el clip nasal para tirar del extremo inferior de la máscara hacia la mandíbula.

Condiciones de almacenamiento: Almacenarse en lugar limpio y seco, buena ventilación, humedad no superior al 80% y temperatura entre 5°C y 50°C. Consumir antes de la fecha de vida útil. **INDICACIONES:** Compruebe si el envase está en buenas condiciones. Si está dañado, no lo use. Usar lo antes posible después de abrir el envase. El tiempo de uso no debe exceder las 12 horas. No debe ser utilizada durante más de un turno de trabajo. No lavable. Por favor, usar dentro de la validez. Caducidad: 2 años. Material: (5 capas), tela no-tejida, tela meltblown, tela de algodón, clip ajustable y arnes de orejas.

Este producto está diseñado para proteger contra aerosoles sólidos y líquidos de la atmósfera ambiental, ha pasado EN149: 2001 + A1: 2009 en conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425

Lote: /Fecha de producción: ver envase / Final de vida útil: 2 años.

ENG - SEE INFORMATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER.

Method of Use: Step 1. Open the mask, keep the nose clip up, and pull one ear strap with each hand. Step 2. Hold the mask on the face and hold the mask against your chin. Step 3. Put the two ear belts on your ears separately. Step 4. Place the fingers above the top of the built-in metal bar, press and move the finger tips to the side of the nose until the clip is pressed into the shape of bridge.

INDICATIONS: Please check whether the package is in good condition. If damaged, do not use it. Check the information on packaging and make sure the product within the validity date Product do not reusable. Each mask should not be used for more than 1 shift. Replacing mask between 12 hours is recommended. Wash your hands carefully after handling used mask. Condition of Storage and Transportation: Well-ventilated and Non-corrosive Storage. Protection from moisture and sunlight during transportation. Storage Temp: 5°C - 50°C. Storage Humidity: ≤80% RH.

Description of Product Functions and Compliance: This product is designed to protect against both solid and liquid aerosols from the ambient atmosphere, it has passed EN149:2001+A1:2009 to show conformity to the EHSR of Regulation (EU) 2016/425

Application Scope: Suitable for daily protection during high seasons such as flu, haze and pollen allergy.

Product Structure: (5 layers) 1st ply: Polypropylene spunbond non-woven fabric, 2nd ply : Filter cotton, 3rd&4th ply : Meltblown non-woven fabric,5th ply : Polypropylene spunbond non-woven fabric.

1 UD.



8 435382 498732


FIRST[®] PROTEC

FFP2-NR

EcoMatters Protective mask
Media Máscara Filtrante NR

ecomatters JY-MF-B1

€ | 0598
EN 149:2001+A1:2009

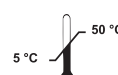

GER - SIEHE DIE VOM HERSTELLER GELIEFERTEN INFORMATIONEN.

Gebrauchsanweisung: Schritt 1: Öffnen Sie die Maske, halten Sie den Nasenclip oben und ziehen Sie mit jeder Hand an einem Ohrschlauf. Schritt 2: Setzen Sie die Maske auf das Gesicht und halten Sie die Maske an Ihr Kinn. Schritt 3: Führen Sie die beiden Ohrschlaufen separat über die beiden Ohren. Schritt 4: Platzieren Sie die Finger über der Oberseite des eingebauten Metallstegs, drücken Sie den Metallsteg mit den Fingerspitzen zur Nasenseite, bis der Bügel an das Nasenbein angedrückt eine Brückenform annimmt.

HINWEISE: Bitte prüfen Sie, ob die Verpackung in gutem Zustand ist. Wenn sie beschädigt sein sollte, verwenden Sie das Produkt nicht. Überprüfen Sie die Informationen auf der Verpackung und achten Sie darauf auf die Angaben des Haltbarkeitsdatums. Das Produkt ist nicht wiederverwendbar. Jede Maske sollte nicht für mehr als 1 Schicht verwendet werden. Es wird empfohlen, die Maske nach jeweils 12 Stunden auszutauschen. Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig, wenn Sie eine gebrauchte Maske berühren. Lager- und Transportbedingungen: Gut belüftete und nicht korrosive Lagerung. Schutz vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht während des Transports. Lagertemperatur: 5°C - 50°C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: ≤80% RH. Beschreibung der Produktfunktionen und Konformität: Dieses Produkt wurde zum Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen aus der Umgebungsatmosphäre entwickelt, es hat die EN149:2001+A1:2009 bestanden, wodurch die Konformität mit den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 nachgewiesen wird.

EAN 13



8 435382 498732





Fi Album

Maletín ecomatters JY-MF-B1
20 cajas de 10ud.

FIRST[®] PROTEC

