



FICHA TECNICA MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 NR

-Esta mascarilla es un dispositivo de protección respiratoria contra partículas, aerosoles sólidos y líquidos, y consta de 5 capas de Tejido no Tejido, de las siguientes características:

Capa externa - Spunbond de Polipropileno

Segunda capa- Meltblown 100% Polipropileno libre de Fibras de Carbono o Gafeno

Tercera capa - Meltblown 100% Polipropileno libre de Fibras de Carbono o Gafeno

Cuarta capa - Spunlace de Polipropileno Hidrófobo

Capa interior - Spunbond de Polipropileno

-Pinza metálica nasal de 5 mm de ancho, y 88 mm de largo

-Sin válvula de exhalación.

-Banda de ajuste elástica exenta de látex en cada uno de los 2 laterales de 165 mm de largo.

-Filtración de partículas mínima del 95%


-Baja resistencia a la Inhalación debido a la acción mecánica y electrostática.

- Uso recomendado tras uso continuado durante 8 horas. En caso de que se deteriore, humedezca en exceso o se ensucie antes de dicho tiempo, se recomienda sustituirlo por otro.


Fecha de caducidad: 24 meses desde la fecha de fabricación. Ver mascarilla

Es conforme a la Norma Armonizada Europea EN 149:2001+A1:2009.

CE 0370

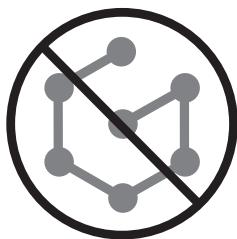

Graphene Free

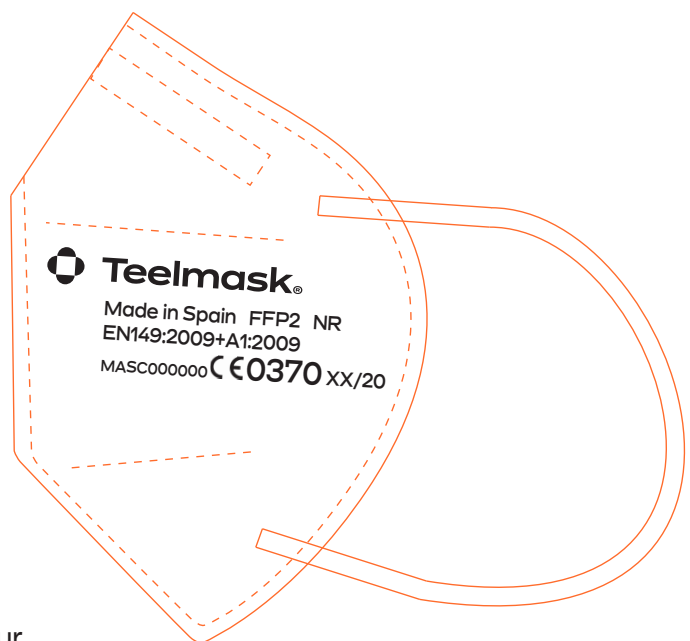

Teelmask, S.L. - Urreta bailara, 10 - 20495 Albiztur

Tel: 943 69 11 17 - info@zelatun.com

Estos datos son orientativos: Obligatoriamente un Técnico Superior en Prevención debe realizar una evaluación de riesgo del puesto, y determinar el nivel de prevención a utilizar.